

PRÓTESIS PENEANA MALEABLE GENESIS

Cuidados Postoperatorios
Guía Informativa




Coloplast

Recientemente recibió una prótesis maleable Coloplast. **Revisa esta guía para conocer más sobre los cuidados posteriores al procedimiento.**

Acerca de su prótesis

La Prótesis Peneana Maleable consiste en dos varillas firmes pero flexibles que se colocan dentro del cuerpo del pene. Este implante no cuenta con otras partes adicionales. Para lograr una erección, simplemente se toma el pene y se coloca en la posición deseada. Al finalizar, se dobla nuevamente hacia abajo para mantenerlo discreto y oculto.

El implante peneano maleable puede ser una excelente opción para hombres con destreza manual limitada

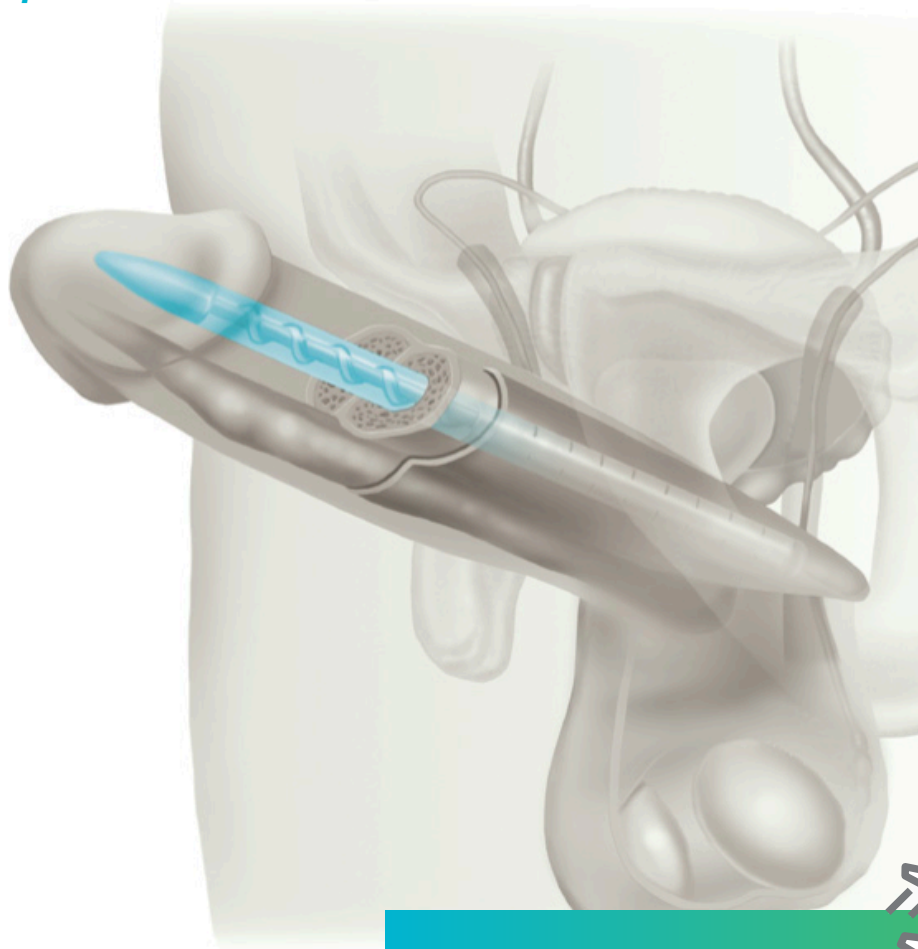

La Prótesis Maleable es segura para los controles de seguridad estándar en aeropuertos

y puede someterse de manera segura a estudios de resonancia magnética (MRI) cuando se utilice de acuerdo con las condiciones específicas de uso para MRI establecidas.

Después del procedimiento, su cuerpo necesitará tiempo para sanar. Durante la recuperación inicial, tenga en cuenta lo siguiente:



Actividad Física

Se recomienda limitar su actividad durante las primeras 48 horas. Puede realizar caminatas cortas. Evite levantar objetos pesados o realizar actividades extenuantes hasta que su médico le indique que puede hacerlo.



Actividad Sexual

Evite la actividad sexual antes de su visita de seguimiento. Su médico le indicará cuándo puede reanudarla de manera segura.



Manejo del dolor y medicación

Su médico puede recetarle antibióticos y/o medicamentos para el dolor después de la cirugía. Tómelos exactamente como fueron indicados. Colocar una compresa fría o bolsa de hielo sobre el pene y el escroto puede ayudar a disminuir la inflamación postoperatoria.



Dieta

Después de la cirugía, debería poder regresar a sus hábitos normales de alimentación. Mantenerse hidratado y seguir una dieta balanceada ayudará a mantener un patrón urinario regular y favorecerá la recuperación.



Baño

Espere al menos dos días después de la cirugía y mantenga seca el área de la incisión. Al tercer día podrá bañarse. Lave cuidadosamente el sitio de la incisión con agua y jabón, y seque suavemente dando pequeños toques.

***1 día después de la cirugía*

Si recibió un catéter urinario, deberá regresar al consultorio de su médico para retirarlo.

Qué esperar después de su procedimiento

Es importante seguir las recomendaciones e indicaciones médicas proporcionadas por su médico para asegurar los mejores resultados posibles después de su procedimiento.

Después de su procedimiento, es normal que pueda presentar:

- Inflamación leve, dolor y molestias.
- Su médico puede proporcionar instrucciones especiales y/o recetar medicamentos para ayudar a sentirse más cómodo durante el proceso de recuperación.
- Limite la actividad física durante las primeras 48 horas después de la cirugía.
- No debe reanudar la actividad sexual hasta haber hablado con su médico.
- El dolor postoperatorio normalmente disminuirá dentro de los 7 a 21 días posteriores a la cirugía.

Cuándo llamar a su médico:

- Si el dolor persiste por más de 21 días.
- Si presenta inflamación moderada o severa del escroto.
- Si nota un aumento en el enrojecimiento o inflamación en el sitio de la incisión.
- Si presenta fiebre o un aumento de la temperatura corporal mayor a 38° Celsius.
- Si presenta secrección o drenaje después de 2 semanas.

Efectos secundarios del procedimiento

Como cualquier procedimiento quirúrgico, la colocación de una prótesis peneana maleable puede presentar riesgos y efectos secundarios.⁴:

- **Dolor**
- **Falla mecánica**
- **Infección**
- **Erosión**
- **Longitud inadecuada de las varillas**

Si cualquiera de estas situaciones ocurre, comuníquese con su médico de inmediato

NO...

- ❌ **se preocupe** si experimenta ligeras molestias, dolor o inflamación durante su recuperación. Es común presentar estos efectos secundarios después del procedimiento.
- ❌ **manipule su dispositivo por primera vez** sin antes hablar con su médico.
- ❌ **acepte recomendaciones médicas de cualquier persona que no sea su médico tratante.**

Información Importante de Seguridad:

Un implante peneano, también llamado prótesis peneana, se encuentra completamente oculto dentro del cuerpo y está diseñado para tratar la disfunción eréctil (impotencia). El implante requiere cierto grado de manipulación antes y después de la actividad sexual para lograr que el pene se encuentre erecto o flácido.

Las prótesis peneanas son soluciones quirúrgicas que requieren un periodo de recuperación y presentan riesgos asociados con la cirugía, tales como dolor, reacciones a la anestesia, necesidad de una nueva cirugía debido a infecciones o problemas mecánicos del dispositivo. El implante elimina la posibilidad de una erección natural.

Algunas consideraciones al elegir una prótesis peneana pueden incluir su condición médica, estilo de vida, preferencias personales y costo.

Este tratamiento es prescrito por su médico. Aunque muchos pacientes se benefician del uso de este dispositivo, los resultados pueden variar. Hable con su médico sobre las diferentes opciones de tratamiento para comprender los riesgos y beneficios de cada alternativa y determinar si una prótesis peneana es adecuada para usted.

**Para más información o preguntas adicionales,
comuníquese con Coloplast Corporation al 1-800-258-
3476 y/o consulte el sitio web www.coloplast.us**

ColoplastMensHealth.com

Para los pacientes que
hablan español, visite
LaBombita.com

LA BOMBITA®

1. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583046/>.
2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583056/>.
3. Data on file with Coloplast.
4. Coloplast Titan IFU.



[Ostomy Care](#)
[Continence Care](#)
[Wound & Skin Care](#)
[Interventional Urology](#)

Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411
Interventional Urology Surgical Support 1-800-258-3476

www.coloplast.us The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.

© 2019 Coloplast Corp. All rights reserved.

PM-08214 08.19